




### Ceinture 4 pointes coussinée de style Y

Accommodée de plastrons de Néoprène, cette courroie 4 pointes offre un support du bassin au niveau des crêtes iliaques et au niveau crural. Par ce fait le champ de spasticité se trouve très bien contrôlé. De plus, la deuxième courroie installée en crural retient la première pour ainsi garder leur direction respective.

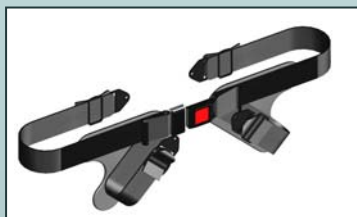

#### PRINCIPES D'INSTALLATION



La ceinture est munie, à chacune de ses extrémités, de plaques d'ancrage. Celles-ci peuvent être vissées sur une plaque rigide ou tout simplement sur les tubes du fauteuil (perçage ¼" ou 6 mm).

L'emplacement de la ceinture peut varier d'un cas à un autre (morphologie, poids), mais ce qui est important de retenir est que celle-ci, correctement installée, réduit considérablement la bascule antérieure du bassin.

Un pré-réglage se fait grâce aux barrettes d'ajustement et le réglage final par velcro.

#### N° de produit

SC7590	Ceinture 4 pointes de style Y pour adulte (boucle plastique)
SC7591	Ceinture 4 pointes de style Y pour enfant (boucle plastique)
SC7592	Ceinture 4 pointes de style Y pour adulte (boucle métal)
SC7593	Ceinture 4 pointes de style Y pour enfant (boucle métal)

#### Installation :

