



Brochure

Membres inférieurs et supérieurs

Solutions en posture




PHYSIPRO

Aides techniques à la posture et à la mobilité

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

Les coussins sont installés selon l'interface et vous sont proposés dans une gamme de formats suggérés ci-dessous.


Installation sur **plaque rigide encastrée**

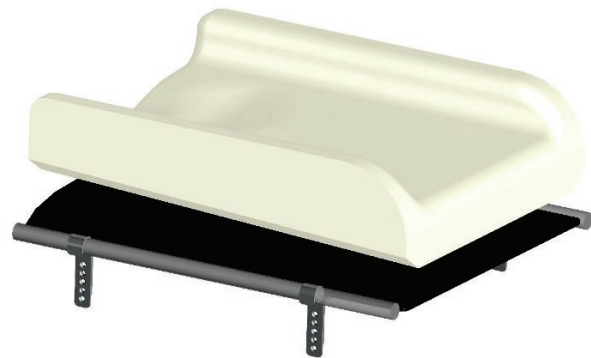

Encastré

Installé sur une plaque rigide fixée par des crochets d'ancrage, le coussin sera biseauté en latéral pour lui permettre un mariage parfait avec son interface.

Installation sur **plaque rigide pleine largeur**

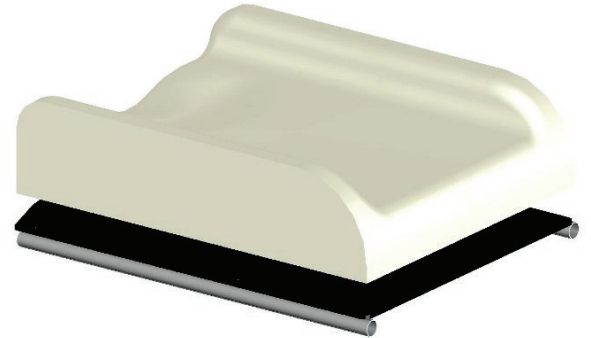

Plat

Sur une plaque de siège fixée aux longerons d'interface cette installation permettra de rallonger le coussin de quelques centimètres en largeur.

Installation sur **une toile canevas**



Coupe canevas

En coupe canevas, le coussin se moule à la toile par un biseutage latéral. Une plaque de renfort incorporée en son centre favorise sa stabilité et élimine l'effet hamac.

ACCESSOIRES POSITIONNEMENT PHYSIPRO

Siège rigide

Le siège rigide est utilisé pour corriger une obliquité du bassin en favorisant sa stabilité et en permettant un meilleur contrôle des membres inférieurs.



Appui-tête et support d'appui-tête

Appui-tête

Ces systèmes offrent un support confortable au niveau occipital. Coussinés et lavables à la machine.



Simple



Combiné



Appui-tête à prolongement latéral réglable



Appui-tête combiné à prolongements latéraux réglables

Support d'appui-tête

Permettent des ajustements en hauteur, en angle et en profondeur. Ceux-ci peuvent être installés sur un dossier rigide ou sur une barre de tension.



Multi-réglable déporté



Multi-réglable droit




Symbio

Harnais


Harnais de poitrine

Fabriqués en néoprène avec une bordure recouverte d'un cordon de lycra apportant ainsi confort et solidité. Maintient le tronc solidement tout en permettant une certaine liberté de mouvement.

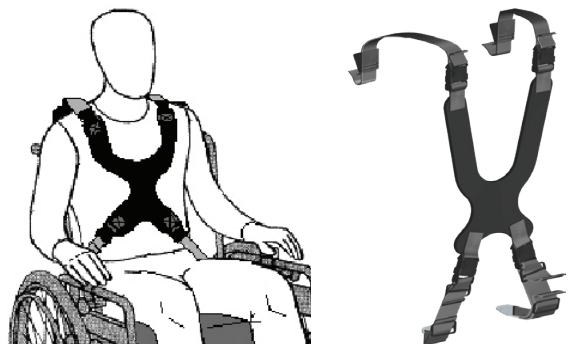

Harnais avec boucle centrale

Permet un ajustement précis et facilite les transferts.

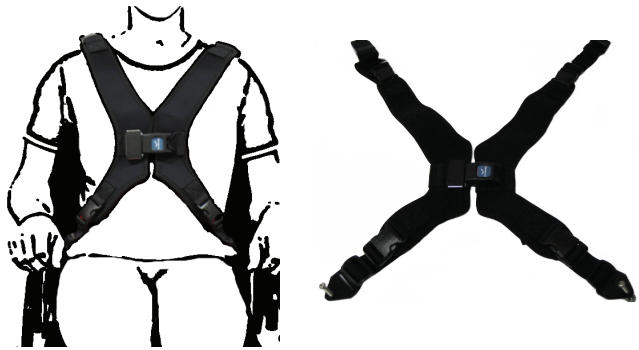

Formats disponibles



Harnais homme

Harnais femme

Harnais enfant

Positionnement pelvien


Ceinture coussinée

Cette courroie permet un bon alignement du bassin. Elle est munie d'un plastron de néoprène qui assure une bonne répartition de la pression exercée et offre un grand confort.



Ceinture stabilisatrice coussinée

Accompagnée de plastrons en néoprène, cette courroie 4 points permet d'obtenir un meilleur support du bassin au niveau des crêtes iliaques et au niveau crural, contrôlant ainsi des mouvements indésirables causant une posture inadéquate.

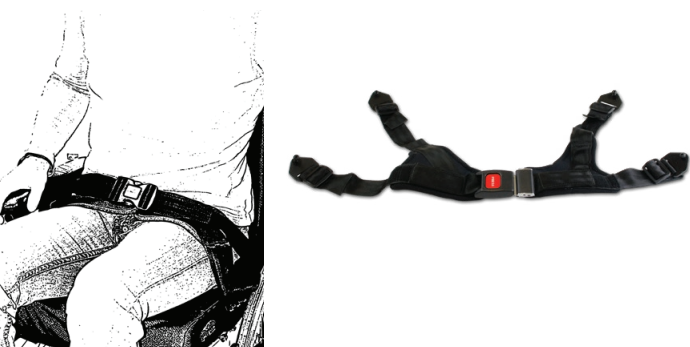

Abduction et Adduction

Abducteur

Ces mécanismes de pommeau d'abduction proposent un choix selon les besoins fonctionnels de tout utilisateurs. Les pommeaux d'abduction sont fabriqués de mousse de forte densité et complété d'une mousse de dispersion.



Mécanisme à bouton pression

Mécanisme à dégagement horizontal

Mécanisme à dégagement verticale

Mécanisme à enclenchement

Pommeau d'abduction

Adducteur

Cette composante de posture est utilisée pour diminuer l'abduction. Son système muni de blocs de serrage se positionne selon l'angle désiré. Il est possible de placer le même système sur la gauche ou sur la droite. L'adducteur peut être installé bilatéralement.



Stabilisateur simple aux genoux

Ce système offre un support et une stabilité accrue au niveau du genou, contrôlant ainsi les glissements du bassin. S'installe sur une tubulure de 7/8" ou 1".




Protège-genou

Ce protège-genou se fixe par des pinces à la plupart des supports d'appuis-pieds. Il est utilisé dans les cas d'abduction pour maintenir l'alignement des membres inférieurs.



Appui-moignon standard et multiréglable

Procure un alignement optimal du moignon du membre inférieur afin d'assurer confort et fonctionnalité. L'appui-moignon s'installe contre la plaque de siège ou à même le longeron du fauteuil roulant grâce une tubulure d'ancrage. Il est composé de plastazote, de mousse mémoire moyenne, de viscosité et d'un biseau crural en pointe en « constructa foam » de 1,5 po. De plus, il est recouvert d'une housse d'Oxford, de Triptex U et Air Knit.

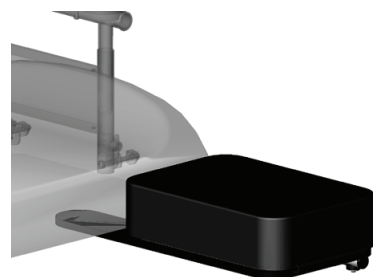

Appui-moignon standard



Appui-moignon multiréglable

Boîte d'appui-pied

Personnalisée, réglable en angle et en hauteur, elle se fixe au devant d'un siège rigide ou directement sur des palettes d'appui-pied.



Bottine rigide

La bottine maintient le pied bien en place tout en assurant un grand confort. Elle se fixe facilement à la palette d'appui-pied par un velcro.



Table et demi-table

En plus de leurs caractéristiques fonctionnelles, les tables de positionnement Physipro apportent un support aux membres supérieurs et facilitent le contrôle du tronc.

La demi-table est souvent proposée dans des cas d'hémiplégie. Elle supporte le membre supérieur paralysé.



Gouttière pour membre supérieur

Procure un confort et une protection sans égal du membre supérieur atteint. Son mécanisme d'ancrage permet des positions latérales et obliques et est réglable en continu. La partie située sous la main est rabattable pour permettre un accès facile aux tables.



FAIT AU CANADA



PHYSIPRO

Aides techniques à la posture et à la mobilité

Canada

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7
Canada

1 800 668-2252
info@physipro.com
www.physipro.com

Europe

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers
France

02 41 69 38 01
contact@physipro.fr